

ブデホル®吸入粉末剤30吸入「MYL」 ブデホル®吸入粉末剤60吸入「MYL」の使用方法

医療関係者用

使用手順

吸入器の各部の名前については裏面をご覧ください



キャップを回しては
ずし、**残量計**（裏面参照）を確認して下さい。



オレンジグリップと**淡オレンジ胸部**を持って、吸入器をまっすぐ立てて下さい。



この状態で**オレンジグリップ**を**反時計回り**に止まるまで回して下さい。



そのまま**オレンジグリップ**を**時計回り**に戻して下さい（『カチン』音が1回します）。



淡オレンジ胸部から手を放し、吸入器に**かからないようにして息を吐きます**。




背筋を伸ばし、**白色吸入口**を**しっかりくわえて、深く大きく吸い込んで下さい**。その後、白色吸入口から口を離し、ゆっくりと息を吐いて下さい。



キャップを**しっかり閉めて保管**した後、必ず**うがい**または**口すすぎ**をして下さい。

医師の指示で複数回吸入するときは繰り返して下さい

新たに開封した吸入器での準備操作

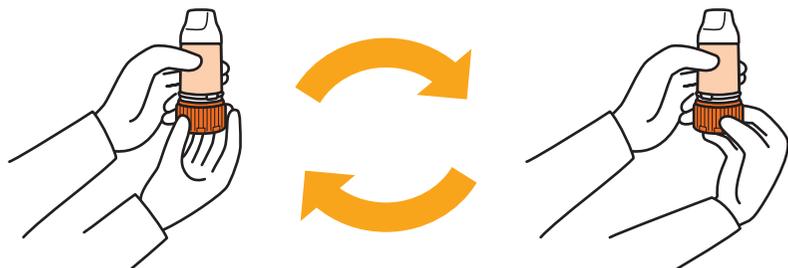

オレンジグリップを左右に回して下さい。

（時計回しのたびに『カチン』音が1回します。）


『カチン』**音4回**で準備操作完了です。

そのままの状態で使用手順に戻して下さい。

誤った使用方法



オレンジグリップを回す時に白色吸入口を持つ

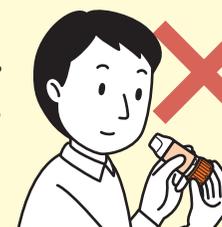

オレンジグリップを回す時に吸入器を傾ける



吸入器に向けて息を吐く




指や口で通気口をふさぐ



口と白色吸入口の間に隙間ができる

各部の名前

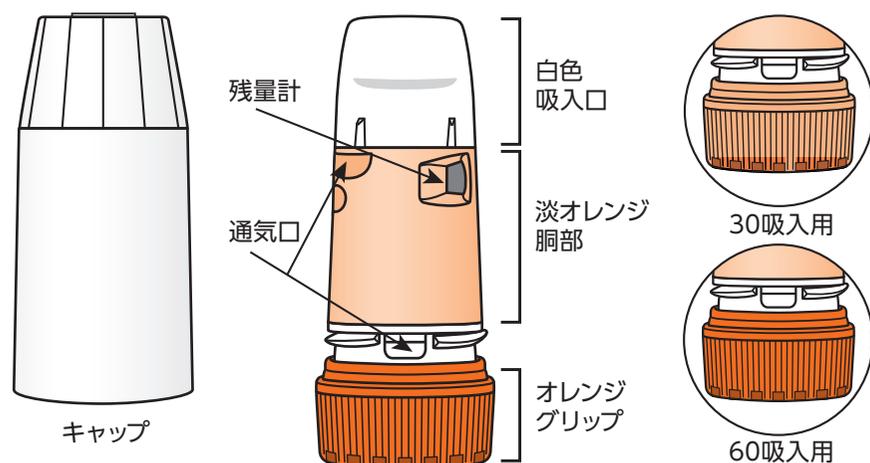

残量計の表示

- 残量計は残りの吸入可能なおよその回数を表示しています。
- オレンジグリップを回すたびに文字盤が少しずつ回転するので、必要以上に回さないで下さい(薬剤が無駄になります)。
- 残量計の中央に『0』が表示され、文字盤が回転しなくなった場合、新しい吸入器に交換して下さい。

	30吸入用	60吸入用
使用開始時		
表示の進み方	30→15→0	60→40→20→0
吸入器交換時期	『0』が中央に表示されたとき	

吸入についての注意事項

- 本剤を使用される際は、医師または薬剤師の指導を受けて下さい。
- 淡オレンジ胸部を持って、オレンジグリップを反時計回りに回し、時計回りに戻す操作(戻したときに『カチン』音が1回します)を行うことで1吸入分の薬剤がセットできます。この操作を繰り返しても、薬剤は1吸入分しかセットされませんので、必要以上に回さないで下さい。
- 白色吸入口を持ってオレンジグリップを回すと、『カチカチカチ…』音がしますが、このとき薬剤はセットされず、正しく吸入することはできません。必ず淡オレンジ胸部を持って、オレンジグリップを回して下さい。
- 吸入する薬剤の量はごくわずかであるため、**薬剤を吸った感じがしないかもしれませんが、操作が正しく行われていれば薬剤は吸入できています。**
- 医師に指示された吸入回数を必ず守って下さい。

取り扱い上の注意(保管・手入れ・廃棄)

- 使用後は必ずキャップをしっかり閉めて室温で保管して下さい(中に乾燥剤が入っていますが、保管は正しく行って下さい)。
- 白色吸入口が汚れた場合は乾燥した布などで拭き、水洗いはしないで下さい(吸入口は回りますが取り外せない構造になっています)。
- 吸入器を分解しないで下さい。
- 各自治体の廃棄方法にしたがって廃棄して下さい(容器はプラスチックと金属スプリングのパーツからできています)。
- 疑問点や質問等がある場合には医師または薬剤師にご相談下さい。

お問い合わせ先

ヴィアトリス製薬株式会社 メディカルインフォメーション部
フリーダイヤル：0120-419-043

受付時間：9:00～17:30
(土日・祝日および当社休業日を除く)

製造販売元

東亜薬品株式会社

販売元

ヴィアトリス製薬株式会社